



一次性使用术中测压输尿管内窥镜导管

HUS-M系列

独创的风险预测指标斑马指数

ZebraScope®一次性使用术中测压输尿管内窥镜导管

实时测压

轻松操控 —— ZebraScope® HUS-T软镜系列集高质量成像、超细设计与高耐用性于一身，助您在碎石过程中轻松挑战不利解剖结构的肾下盏结石，带来卓越的操控体验。




减少手部疲劳：控制杆的锁止功能有效防止靶位点脱离视野，减轻手部疲劳，提高手术效率。同轴操作具有卓越的传输特性和灵活性，旋转手腕即可轻松实现远端操作。

蛇骨外覆盖编织网：临床使用更安全，有效预防由于蛇骨意外损坏而导致无法退镜的风险



上下最大弯曲角度275°，结合12.5°立体偏转角，提供卓越的灵活性。确保产品能轻松通过小NPA、窄肾盏颈口和肾盂漏斗过长等不利解剖结构的肾下盏。

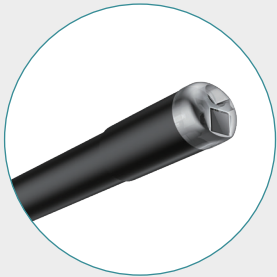

高清画质：16万像素的高清画质，确保优质的成像质量。

改善术野和净石效果：

HUS-M系列



基本尺寸	插入部外径	8.6Fr
	工作通道内径	3.6Fr
	视向角	0°(直视)
光学性能	视场角	110°
	观察景深	2mm—50mm
	像素	16万像素
	摄像模块	CMOS
	照明光源	LED
弯曲度	上弯曲度	275°
	下弯曲度	275°


适用范围

与本公司电子内窥镜图像处理器和肾盂测压处理器配合在医疗机构中使用,用于泌尿系统上尿路疾病检查、诊断或治疗中成像及压力测量。不能与高频附件配用。


型号/规格	HUS-M101	工作长度670mm
	HUS-M102	工作长度660mm
	HUS-M103	工作长度650mm
	HUS-M104	工作长度640mm
	HUS-M105	工作长度380mm

更多的产品信息

斑马®一次性使用术中测压输尿管内窥镜导管有两个版本:一个种是标准弯曲,通常在美国使用;另一种是反向弯曲,通常在欧盟使用。

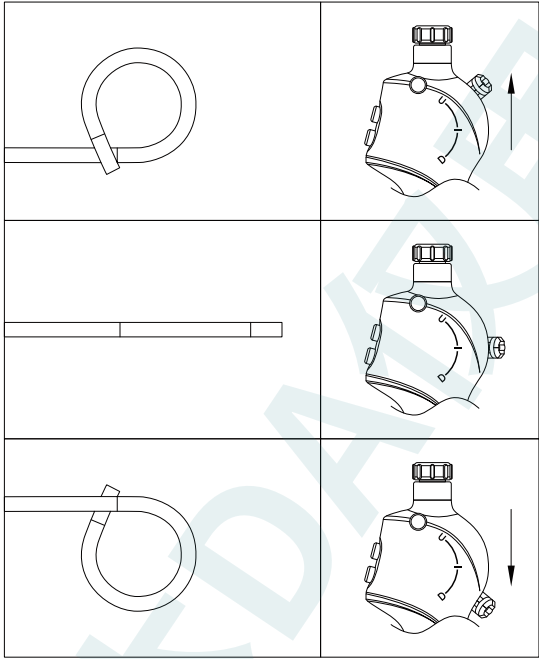

标准弯曲版:控制杆向下移动,软镜先端向下弯曲(向后)。
控制杆向上移动,则软镜先端向上弯曲(向前)

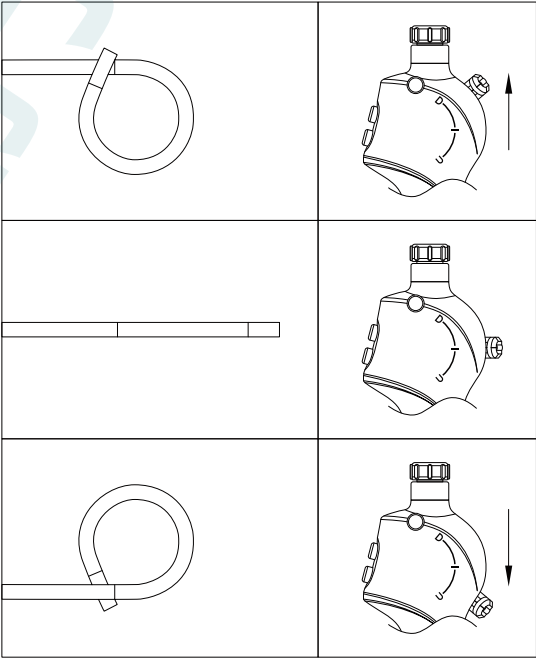

反向弯曲版:控制杆向下移动,软镜先端向上弯曲(向前)。
控制杆向上移动,则软镜先端向下弯曲(向后)。



幸福工场订阅号



幸福工场公众号

安徽省幸福工场医疗设备有限公司
地址:安徽省蚌埠市蚌山区姜桥路1300号智慧产业园2栋
网址:www.hwmeds.com